

ELEKTRICKÁ ZUBNÁ KEFKA LAIFEN WAVE

laifen

podrobný návod na použitie

Dôležité rady k bezpečnosti

NEBEZPEČENSTVO

1. Nevystavujte prístroj ani batérie vysokým teplotám.
2. Dbajte, aby nedošlo ku skratu kovovými predmetmi, ktoré by sa dotkli kontaktov batérií napájaného zariadenia alebo zdrojov napájania.
3. Ak dôjde k vytečeniu batérie, okamžite ju prestaňte používať. Likvidáciu vytečených batérií vykonávajte v súlade so zákonnou úpravou nariadenia o nakladaní s odpadmi. Nevhadzujte batérie do bežného domového odpadu.
4. Napájacie súčasti tohto zariadenia nevystavujte vlhku a vode.
5. Nenabíjajte prístroj s mokrou nabíjacou zásuvkou.

VAROVANIE

1. Tento prístroj obsahuje akumulátory, ktoré nie je možné vymeniť. Až skončí životnosť akumulátorov, postupujte pri likvidácii prístroja podľa pokynov pre jeho recykláciu.
2. Účinné nabíjanie akumulátorov prebieha v prostredí s teplotou medzi 0 °C a 30 °C. Pri teplote okolia mimo tohto rozsahu nemusí dôjsť k úplnému nabitíu akumulátorov alebo je nabíjanie neefektívne.
3. Pravidelne kontrolujte napájaciu jednotku, či nie je poškodená. Ak zistíte poškodenie, okamžite ju prestaňte používať a vymeňte ju.
4. Ak sa zdá, že je prístroj poškodený, zvlášť rukoväť alebo čistiaca hlavica, prestaňte ho používať.
5. Nesnažte sa prístroj upraviť alebo opraviť sami.
6. Nečistite prístroj riedidlami, rozpúšťadlami alebo inými chemikáliami.
7. Neponárajte prístroj do vody hlbšie ako 1 meter na dobu dlhšiu ako 30 minút.

POZOR

1. Keď budete tento prístroj používať prvýkrát, môžete pocítiť miernu nepohodu alebo môže dôjsť k miernemu krvácaniu ďasien, než si ďasná zvyknú na tento spôsob čistenia. Odporúčame začať režimom 1. Počiatočné nepohodlie by malo pominúť do 1–2 týždňov. Ak však pretrváva dlhšie, prestaňte kefku používať a poraďte sa so svojim zubným lekárom.
2. Tento výrobok vyhovuje bezpečnostným štandardom platným pre elektromagnetické zariadenia. Ak máte obavy v súvislosti s kardiosťimulátormi či inými implantátmi, poraďte sa pred použitím prístroja s lekárom alebo dodávateľom implantátu.
3. Tento výrobok je určený výhradne na čistenie zubov, ďasna a jazyka. Nepoužívajte ho k akýmkoľvek iným účelom.
4. Užívatelia so zubnými strojčekmi alebo inými ortodontickými doplnkami by mali tento prístroj použiť len po konzultácii so zubným lekárom. Pokiaľ pri čistení zubov dochádza ku krvácaniu, cítite nepohodlie, bolesť alebo máte iné ťažkosti, poraďte sa so zubným alebo praktickým lekárom.
5. Tento prístroj nie je určený na to, aby bol používaný osobami (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo rozumovými schopnosťami, ani osobami s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, pokiaľ nie sú pod dohľadom a nedostanú pokyny, ako prístroj používať od osoby, ktorá je zodpovedná za ich bezpečnosť. Deti musia byť pod dohľadom, aby sa s prístrojom nehrali.
6. Čistiace hlavice nezdieľajte s ostatnými ľuďmi.
7. Čistiace hlavice odporúčame meniť každé tri mesiace. Ak je čistiaca hlavica poškodená alebo deformovaná, vymeňte ju okamžite.
8. Tento výrobok je kompatibilný iba s čistiacimi hlaviciami pre elektronické kefky Laifen. Nepreberáme žiadnu zodpovednosť za dôsledky použitia iných čistiacich hlavíc.

INFORMÁCIE O SÚLADE S NARIADENIAMI

Nariadenie FCC

Tento prístroj vyhovuje časti 15 pravidiel FCC. Činnosť zariadenia je možná za týchto dvoch podmienok: (1) toto zariadenie nesmie byť príčinou vzniku škodlivých interferencií a (2) toto zariadenie musí prijať interferencie z okolia, vrátane tých, ktoré môžu jeho činnosť ovplyvniť nežiaducim spôsobom. Zmeny alebo úpravy neschválené stranou zodpovednou za dodržiavanie predpisov by mohli spôsobiť, že používateľ stratí oprávnenie zariadenia obsluhovať. Toto zariadenie bolo testované a uznané vyhovujúcim v rámci obmedzení pre digitálne zariadenia triedy B podľa časti 15 predpisov FCC. Tieto obmedzenia sú stanovené preto, aby zabezpečili istú mieru ochrany proti škodlivým interferenciám v obytných oblastiach. Toto zariadenie vytvára, využíva a môže vyžarovať energiu v pásme rádiových vln a, ak nie je inštalované a používané v súlade s týmto návodom, môže byť príčinou škodlivých interferencií narúšajúcich rádiovú komunikáciu. Nedá sa však zaručiť, že za istých okolností nebude k interferenciám dochádzať. Pokiaľ zariadenie spôsobuje škodlivé interferencie rušiacie príjem rozhlasu či televízie, čo je možné overiť vypnutím a zapnutím zariadenia, odporúčame užívateľom interferencie vylúčiť jedným alebo niekoľkými nasledujúcimi spôsobmi:

- Presmerujte alebo premiestnite anténu prijímača.
- Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Pripojte zariadenie do zásuvky v inom elektrickom okruhu, než do ktorého je pripojený prijímač.
- Poradte sa s dodávateľom či skúseným rozhlasovým/TV technikom a požiadať ich o pomoc.


Zariadenie bolo testované, či spĺňa všeobecné požiadavky na rádiový frekvenčný vyžarovanie. Prístroj je možné používať v prenosnom expozičnom stave bez obmedzenia.

OBSAH BALENIA

1x rukoväť kefky (nerezová oceľ / hliníková zliatina / biely ABS plast), 3x čistiaca hlavica (Gum Care / Super-Clean / Ultra-Whitening), 1x magnetický nabíjací kábel, 1x stručný návod na použitie, 1x podrobný návod na použitie
Model LFTB01-T Titanium: 6x hlavica v balení

TECHNICKÉ ÚDAJE

Názov výrobku: Elektrická zubná kefka Laifen Wave
Modely: LFTB01-S/A/P (3 nástavce v balení) LFTB01-T (6 nástavcov v balení)
Pracovné napätie: 7,6 V ---
Príkon: 6 W
Napájanie: 5 V --- 1 A
Kapacita akumulátora: 900 mAh
Doba nabíjania: ~2,5 hodiny
Vodeodolnosť: IPX7

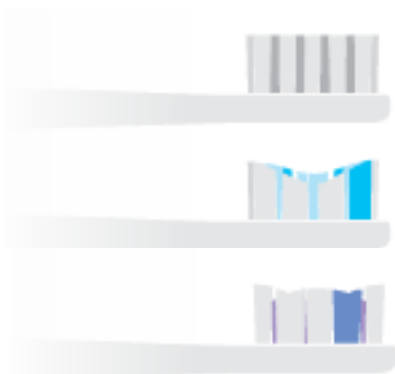

VOĽBA SPRÁVNEJ HLAVICE KEFKY

Gum Care - extra jemný

Ultra jemné a mäkké štetiny sa dostanú hlboko do medzizubných priestorov. Jemne vyčistí ako ďasná, tak zuby. Vhodná hlavica pre tých, ktorí chcú jemné, nerušené každodenné čistenie zubov.

Super-Clean – super čistiaci

Štetiny v tvare C kopírujú povrch zubov a zaisťujú, že pri čistení nevynecháte jediné miesto. Vhodné pre tých, ktorí potrebujú účinné čistenie, ktoré zároveň bielia.

Ultra-Whitening – s bieliacim účinkom

Štetiny v tvare W určené na zväčšenie leštenej plochy zaručujúce žiarivejší úsmev. Vhodné pre tých, ktorí potrebujú účinné čistenie, ktoré zároveň bielia.

AKO POUŽÍVAŤ KEFKU

1. Nasadzovanie a výmena čistiacej hlavice

Nasadzovanie: Natočte štetiny na hlavicu kefky tak, aby mierili na prednú časť rukoväte. Nasadte hlavicu zatlačením dole na hriadeľ motora. Overte si, či medzi oboma časťami kefky zostáva malá medzera (aby kefka fungovala, je nutné, aby zostala zhruba milimetrová medzera).

Výmena: Podržte rukoväť a jemne vytlačte hlavicu hore.

Tým ju zložíte. Potom nasadte novú hlavicu.

2. Zapínanie/vypínanie a prepínanie režimov

Stlačte jedenkrát tlačidlo vypínača a kefku zapnete/pozastavíte.

Dvojitým stlačením prepínate režimy:

1) Režim 1: Vhodný pre prvé použitie a pre užívateľov s citlivými zubami.

2) Režim 2: Vhodný pre každodenné používanie pre užívateľov, ktorí požadujú skvelé výsledky čistenia.

3) Režim 3: Vhodné pre užívateľov, ktorí potrebujú odstrániť povlak a požadujú silný bieliaci účinok. Ak je kefka v činnosti, jedným stlačením čistenia pozastavíte. Ak trvá pozastavenie dlhšie ako 10 sekúnd, kefka sa automaticky prepne do spánkového režimu.



ĎALŠIE CHYTRÉ FUNKCIE

Chytré prebudenie: Zdvihnite kefku do vzpriamenej polohy a prebudíte ju zo stavu pozastavenej činnosti. Ukazovatele činnosti a režimu sa rozsvietia.

Časovače čistenia: Po dvoch minútach používania ucítite vibráciu kefky, a ten automaticky prejde do spánkového režimu (časovač nie je ovplyvnený pozastavením, ale vynuluje sa po prepnutí do spánkového režimu). Časovač je možné nastaviť v rozsahu 1–5 minút v aplikácii Laifen funkciou Brushing Duration (doba čistenia); ak máte v aplikácii nastavený vibračný signál po 30 sekundách, bude kefka vibrovať dvakrát každých 30 sekúnd, aby pripomenula, že potrebuje zmeniť oblasť čistenia.

Letový režim: Stlačenie vypínača na dobu dvoch sekúnd prepne kefka z každého režimu do režimu letového. Ďalším stlačením po dobu dvoch sekúnd letový režim vypnete.

PRIPOJENIE K APLIKÁCII LAIFEN

Načítajte QR kód alebo navštívte obchod s aplikáciami, stiahnite a nainštalujte aplikáciu. Ak už máte aplikáciu Laifen stiahnutú, overte si, či používate jej najnovšiu verziu a vykonajte registráciu prostredníctvom svojej emailovej adresy.

- Kefku zapnite. Ukazovateľ činnosti by sa mal rozsvietiť (ak je ukazovateľ vypnutý, je kefka v spánkovom režime a nemôže sa k aplikácii pripojiť).
- Otvorte aplikáciu a kliknutím na „+“ a nájdite svoj prístroj. Potom kliknite na zariadenie pomenované LFTB01-X-XXXX, aby ste ho pripojili (XXXX predstavuje identifikačné číslo zariadenia).
- Keď sa párovanie podarí, ukazovateľ činnosti sa rozsvieti modro.



Stav nabitia akumulátora:	100–50 %	50–20 %	20–10 %	10–1 %
Stav ukazovateľa:	svieti zeleno	svieti žltó	svieti červeno	bliká červeno
Stav nabitia akumulátora: 0%				
Stav ukazovateľa:	Červená kontrolka blikne každú 0,5 sekundu, kým motor neprestane vibrovať.			

INFORMÁCIE O DOBÍJANÍ

Pred prvým použitím je potrebné dobiť akumulátor v kefke. Pri dobíjaní dodržujte nasledujúce pravidlá:

1. Riadne spojte spodnú časť kefky s magnetickým držiakom kábla. Nepoužívajte silu, aby ste prístroj nepoškodili.
2. Pripojte magnetický nabíjací kábel k adaptéru s konektorom USB-C a kefku nabíjajte z elektrickej zásuvky s menovitým napätím 100–240 V, 50/60 Hz.

Kontrolky nabíjania uvádzajú stav nabitia akumulátora nasledovne:

Stav nabitia akumulátora:	100 %	99–0 %
Stav ukazovateľa:	svieti zeleno	bliká zeleno


3. Súčasťou dodávky prístroja nie je nabíjací adaptér. Ten je potrebné zaobstarať samostatne. Nenabíjajte prístroj vo vlhkom prostredí ako sú kúpeľne, aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom.

Riešenie problémov

Ak kefka nefunguje, ako má, tlačidlá nereagujú a kontrolky ukazovateľov režimov a činnosti prístroja blikajú v sekundových intervaloch, obráťte sa na predajcu a požiadajte o pomoc.

ukazovatele
režimov

ukazovateľ
napájania

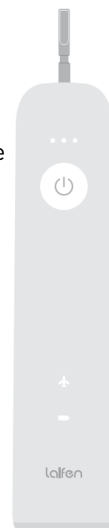

PREHRIATIE

Ak bude teplota motora príliš vysoká, tri ukazovatele režimov a ukazovateľ činnosti prístroja budú súčasne blikieť. Ak k tomu dôjde, prístroj prestaňte ihneď používať a počkajte, kým nevychladne.



Informácie o likvidácii a recyklácii

Správna likvidácia prístroja (elektrický a elektronický odpad) [platné v krajinách s funkčným systémom triedenia odpadu]. Táto značka na výrobkoch alebo v sprievodných tlačенých materiáloch uvádza, že výrobok a jeho elektronické príslušenstvo

nemožno po skončení životnosti likvidovať s bežným domovým odpadom. Aby sa predišlo škodám na životnom prostredí alebo poškodeniu ľudského zdravia z neriadenej likvidácie odpadov, oddelte prosím tieto predmety od bežného odpadu a zodpovedne ich recyklujte, aby ste zlepšili udržateľné znovupoužitie materiálov. Užívatelia by sa mali obrátiť na predajcu výrobku alebo na miestne úrady, kde zistia podrobnosti kde a ako je možné vykonať bezpečnú likvidáciu a recykláciu výrobkov. Používatelia z podnikateľskej sféry by sa mali obrátiť na svojho dodávateľa a zistiť podmienky odkupnej zmluvy. Tento výrobok a jeho elektronické príslušenstvo nemožno likvidovať s bežným firemným odpadom.

Informácie o likvidácii akumulátorov

Elektrická kefka Laifen obsahuje dobíjacie akumulátory typu Li-ion. Všeobecne platí, že životnosť akumulátorov závisí na spôsobe ich používania. Preto ich nenechávajte dlhú dobu vybité alebo nepoužívané.

Upozornenie: Neotvárajte, nepoškodzuje a nevystavujte akumulátory vodivým materiálom (kovom), vlhkosti, tekutinám, ohňu a teplu. V opačnom prípade môžu akumulátory vytiecť alebo vybuchnúť a zraníť osoby v okolí. Zabudovaný dobíjací akumulátor obsahuje látky, ktoré môžu predstavovať hrozbu pre životné prostredie a môžu vyžadovať riadne vykonanie recyklácie v súlade so zvyklosťami danej krajiny av súlade s platnými predpismi. Ak potrebujete profesionálne poradiť s odstránením akumulátorov alebo pokiaľ akumulátory nemožno odstrániť, obráťte sa priamo na firmu Laifen alebo predajte elektrickú zubnú kefku v zbernom dvore.

Postup vybratia akumulátora:

a. Overte, či sa kefka nenabíja; b. Overte, či je kefka vypnutá; c. Otvorte spodný kryt kefky; d. Pomocou izolovaného nástroja odpojte káble; e. Stlačte postranné svorky a odstráňte celú zostavu elektroniky. Potom vyberte akumulátor.

*Po vybratí akumulátora nie je možné kefku pripájať k zdroju elektrického prúdu.

Ďalšie informácie o používaní výrobku nájdete na oficiálnych webových stránkach Laifen: www.laifentech.com

Záruka a technická podpora

Ak potrebujete pomôcť vyriešiť problémy s používaním výrobku, využiť ďalšie služby a pod., spojte sa s nami prostredníctvom webovej stránky <https://www.neoxgroup.cz/kontakty/>. Záručná lehota 2 roky od dátumu nákupu.



NEOX GROUP s.r.o. www.neoxgroup.cz

NEOX GROUP s. r. o.,
V Slavětíně 2632/23, Praha 9 - Horní Počernice 193 00, Česká republika