


návod k použití

Mini masážní bezdrátová podložka zad

MGB-2403

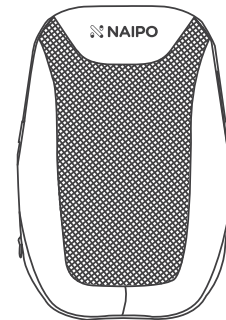

Důležité: Tento návod si ponechte, abyste se k němu mohli později vrátit. Před použitím tohoto přístroje si prosím bedlivě přečtete pokyny.

Bezpečnostní pokyny

Řiďte se prosím základními bezpečnostními pokyny viz níže, abyste omezili a snížili nebezpečí a zdravotní rizika, jako jsou úraz elektrickým proudem, popáleniny a jiná zranění.

1. Nepoužívejte přístroj při koupeli nebo ve sprše.
2. Neumisťujte a neskladujte přístroj na místech, kde by hrozil pád do vany nebo umyvadla.
3. Nikdy pro tento přístroj nepoužívejte špendlíky nebo jiné kovové spojovací prvky.
4. Nepoužívejte v mokru nebo vlhku.
5. Je-li přístroj používán dětmi nebo zdravotně postiženými osobami, je nezbytný dohled dospělé osoby.
6. Přístroj používejte pouze k účelům, které jsou popsány v tomto návodu.
7. Nikdy nepoužívejte masážní přístroj, jste-li ospalí nebo při spánku.
8. Do otvorů přístroje nekládejte a nepouštějte žádné předměty.
9. Nepoužívejte v místech, kde jsou používány a rozprášeny aerosoly (spreje) nebo kam je dodáván kyslík.
10. Nepoužívejte přístroj pod peřinou nebo polštářem. Přístroj pak může vydávat nadměrné teplo, způsobit požár, úraz elektrickým proudem a zranit osoby.
11. Tento přístroj je určen pouze pro soukromé neprofesionální použití.
12. Nepoužívejte na kojence, invalidy, spící osoby nebo osoby v bezvědomí.
13. Nepoužívejte na citlivou kůži nebo na osoby, které nejsou citlivé na teplo.



Varování

- Masážní přístroj používejte nejdéle 30 minut denně.
- Masážní přístroj nepoužívejte při spánku.


Balení obsahuje

1x zádobý masážní přístroj, 1x návod k použití, 1x nabíjecí kabel typu USB-C

Technické údaje

Model MGB-2403
Název zádobý masážní mini-přístroj
napájení 5 V – 2,0 A
kapacita akumulátoru 1800 mAh
příkon 10 W
hmotnost přístroje 1,6 kg
výchozí časovač 15 minut
funkce hnětení/zahřívání

Schéma přístroje

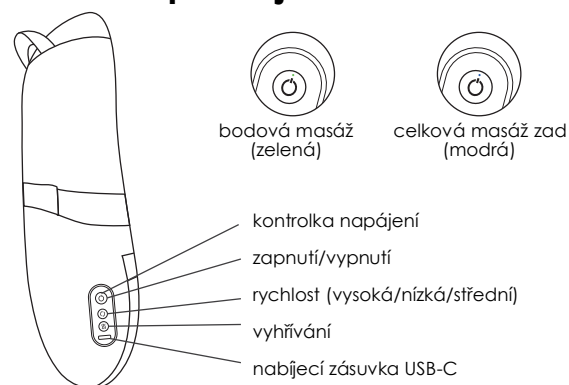

Poznámka

Přístroj před prvním použitím nabijte. Akumulátor je z bezpečnostních důvodů dodáván téměř vybitý.

Návod k použití

1. Stiskem vypínače po dobu 2 sekund přístroj zapnete. Výchozí režim je pohyb nahoru a dolů se zapnutou funkcí vyhřívání. Kontrolka napájení se rozsvítí modře.
2. Krátkým stiskem vypínače přepnete na režim hnětení (kontrolka se rozsvítí zeleně) a dalším stiskem přepnete na normální režim.
3. Tlačítko vyhřívání: stiskem zapnete funkci vyhřívání; kontrolka masážní hlavice se rozsvítí červeně. Po vypnutí funkce vyhřívání kontrolka zhasne.
4. Stiskněte a po dobu 2 sekund podržte vypínač – tím přístroj vypnete.
5. Po 15 minutách činnosti se přístroj automaticky vypne.

Řešení problémů

Situace	Možná příčina	Náprava
nelze spustit	vybitý akumulátor	přístroj dobijte
přestane fungovat	vypršela stanovená doba činnosti / přístroj je přetížený	spusťte přístroj znovu / snižte zátěž přístroje
hluk při používání	rezonuje konstrukce přístroje	normální stav

Údržba a skladování

1. Po použití a před čištěním přístroj odpojte od zdroje elektřiny.
2. NETAHEJTE za napájecí kabel přístroje.
3. K čištění a otírání přístroje používejte výhradně měkký a suchý hadr.
4. Nevystavujte přístroj vysokým teplotám a ohni.
5. NEVYSTAVUJTE přístroj přímému slunečnímu záření.

Záruka a služby zákazníkům

Potřebujete-li pomoci vyřešit problémy s používáním výrobku, využít další služby apod., spojte se s námi prostřednictvím webové stránky

<https://www.neoxgroup.cz/kontakty/>

Záruční lhůta 2 roky od data nákupu.

NEOX GROUP s. r. o., V Slavětíně 2632/23, Praha 9 - Horní Počernice 193 00, Česká republika

Vyrobeno v Číně.



NEOX GROUP s.r.o.

www.neoxgroup.cz

CE RoHS

