


návod k použití masážní pistole NPMGUN-K5

Technické údaje


Název: masážní pistole
 Model: NPMGUN-K5
 Rozměry: 166,5 x 63,5 x 207 mm
 Hmotnost přístroje: zhruba 750 g
 Kapacita akumulátoru: 2000 mAh
 Dobíjecí rozhraní: USB-C
 Doba nabíjení: zhruba 4,5 hodiny
 Výdrž: zhruba 6 hodin (bez zátěže)
 Maximální proud (hraniční): 7 A
 Rychlostní režimy: 10 nastavitelných rychlostí + režim autorotace
 Rychlosti: 1500–2850 ot./min.
 Amplituda: 10,2 mm
 Příkon: 22 W

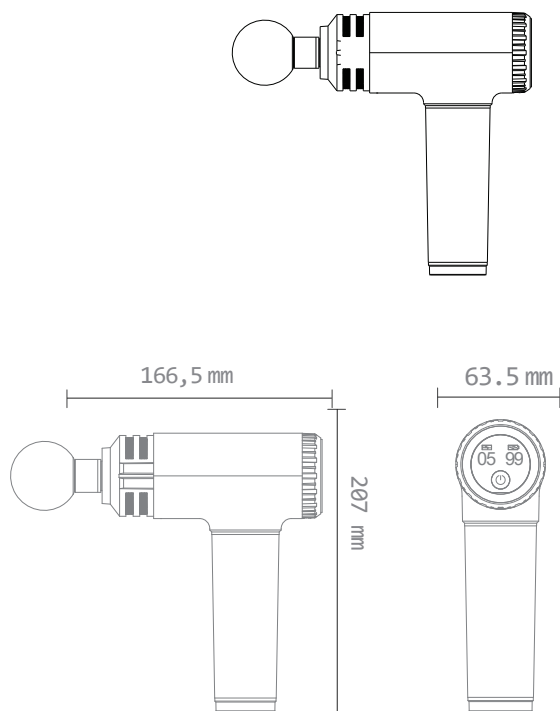

Popis výrobku

Schéma výrobku

1. rychloupínací masážní hlavice
2. rukojeť
3. ukazatel rychlosti
4. ukazatel napájení
5. vypínač a režim funkce
6. dobíjecí rozhraní USB-C

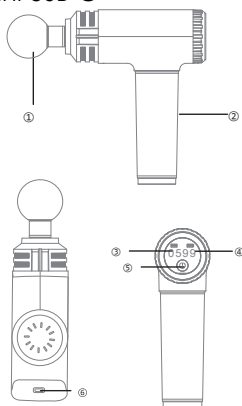

Příslušenství

1. kulová hlavice
2. hlavice tvaru U
3. kuželovitá hlavice
4. plochá hlavice
5. pouzdro
6. nabíjecí kabel USB-C



Stručný návod

1. Nasazení masážní hlavice

(1) Přístroj před nasazením hlavice vypněte. (2) Zvolte požadovanou masážní hlavici vzhledem k záměru masáže. (3) Pomalu nasadte vybranou masážní hlavici do přístroje.

2. Zapínání/vypínání

1. Stiskněte vypínač na dobu 1,5 sekundy, na ukazateli rychlosti (vlevo) se objeví 01 a přístroj bude uveden do provozu. Je-li přístroj zapnutý, stiskem tlačítka na dobu zhruba 1,5 sekundy, ukazatel napájení a ukazatel režimu rychlosti zhasnou a přístroj se vypne.
2. Funkce zablokování
 Proud, při kterém dojde k zablokování přístroje je přibližně 7 A. Zablokování trvá zhruba 3 sekundy. Přístroj přestane pracovat a přepne se do pohotovostního režimu. Po krátkém stisku vypínače bude přístroj pokračovat s posledním nastavením rychlosti. Zůstane-li přístroj v pohotovostním režimu déle než 5 minut, automaticky se vypne.
3. Funkce časovače
 Doba provozu přístroje je zhruba 15 minut, poté se automaticky vypne. Do doby provozu je započtena doba blokování přístroje, kdy se nachází v pohotovostním režimu. Při zastavení činnosti přístroje na dobu alespoň 5 minut se časovač automatického vypnutí znovu nastaví na 15 minut.

3. Funkce přepínače rychlosti

Je-li přístroj zapnutý, krátkým stiskem vypínače měníte rychlosti od 1 do 10. Jedenácté nastavení znamená automatickou kontrolu rychlosti. Rychlosti se přepínají cyklicky. Po zablokování přístroje krátkým stiskem vypínače přístroj znovu spustíte s naposledy nastavenou rychlostí.

4. Pokyny k nabíjení

- (1) Je-li akumulátor vybitý na kapacitu 15 %, kontrolka napájení začne blikat. Když stav akumulátoru klesne na 5 %, kontrolka napájení jednou blikne. Přístroj se automaticky vypne, když je akumulátor vybitý na 0 %. V takové situaci se po stisku vypínače zobrazí blikající „01 00“, ale přístroj se nerozběhne.
- (2) Při nabíjení displej bliká.
- (3) Po nabití se na displeji rozsvítí „8888“.

Důležité rady k bezpečnosti

Poznámky v bodech

1. Tento přístroj lze nabíjet síťovými adaptéry 5 V/2 A nebo podobnými.
2. Před prvním použitím nabijte akumulátor na plnou kapacitu.
3. Napětí nabíjecího zdroje musí být stejné jako napětí přístroje. Před nabíjením si tyto údaje zkontrolujte.
4. **Masážní přístroj nenabíjejte, pokud je zapnutý.**
5. Přístroj neponořujte do vody.
6. **Vibrační funkci hlavičky** nepoužívejte na oblasti hlavy, slabin, hrudi a na části těla, která byla chirurgicky ošetřována.
7. Přístroj nepoužívejte jako doplněk léčby ani jako podpůrnou terapii. Pocítíte-li bolest nebo jste-li právě léčeni nebo používáte jiná zdravotní zařízení, poraďte se před použitím přístroje se svým lékařem.
8. V případě závady se spojte s odbornou opravou. Nikdy přístroj sami nerozebírejte.

Varování

V uvedených případech a v případech, kdy pocítíte zdravotní potíže, se před použitím přístroje poraďte s odborníkem:

1. těhotenství, diabetes a komplikace s tím spojené, jako jsou poškození nervů a sítnice;
2. implantace kardiostimulátoru, nedávný chirurgický zásah, epilepsie či migréna, výhřez meziobratlových plotének, posun obratlů;
3. nedávná implantace kloubní náhrady, vložení nitroděložního tělíska, mozkové implantáty a další zdravotní rizika.

Objasnění ochrany životního prostředí

Tento výrobek obsahuje lithiovou baterii a nesmí být likvidován s běžným domovním odpadem. Po skončení životnosti přístroj zlikvidujte jako nebezpečný odpad nebo jej odevzdejte na sběrném místě pro elektroodpad.

Záruka a služby zákazníkům

Potřebujete-li pomoci vyřešit problémy s používáním výrobku, využít další služby apod., spojte se s námi prostřednictvím webové stránky

<https://www.neoxgroup.cz/kontakty/>

Záruční lhůta 2 roky od data nákupu.

NEOX GROUP s. r. o., V Slavětíně 2632/23, Praha 9 - Horní Počernice 193 00, Česká republika

Vyrobena v Číně.



NEOX GROUP s.r.o. www.neoxgroup.cz

