

**návod k použití**

**MASÁŽNÍ PŘÍSTROJ PRO MASÁŽ CHODIDEL A LÝTEK 2 v 1 S TLAKOVOU A VALIVOU MASÁŽÍ**

typ: MGF-3600



**Úvod**

Děkujeme, že jste si zakoupili masážní přístroj pro masáž chodidel a lýtek 2 v 1 s tlakovou a valivou masáží. Přečtěte si pozorně tento návod k použití a uschovejte si jej, abyste se k němu v případě potřeby mohli vrátit. Budete-li potřebovat jakoukoliv pomoc, obraťte se na naše oddělení podpory zákazníků. Při položení dotazu je nezbytné uvést modelové označení přístroje a číslo objednávky.

**Balení obsahuje**

- 1 x přístroj pro masáž chodidel a lýtek
- 1 x adaptér (použijte prosím pouze určený adaptér)
- 1 x návod k použití

**Technické údaje**

Model	MGF-3600
Označení	Masážní přístroj pro masáž chodidel a lýtek 2 v 1 s tlakovou a valivou masáží firmy Naipo
Jmenovité napětí	24 V stejnosměrných
Spotřeba energie	55 W
Časovač	15 minut

**Důležité bezpečnostní pokyny**

Než začnete výrobek používat, přečtěte si pečlivě celý návod k použití, abyste přístroj používali správně a bezpečně.

1. Pokud je výrobek používán zdravotně postiženými, kteří trpí nějakým typem smyslové nebo mentální poruchy, nebo osobami s nedostatkem zkušeností a znalosti, jak výrobek používat (včetně dětí), je nezbytná přítomnost dozoru.
2. Přístroj uchovávejte mimo dosah dětí.
3. Povrch přístroje se může zahřívat, protože výrobek má zabudované vyhřívání. Lidé, kteří nejsou na teplo citliví, o tom musí vědět.
4. Je-li napájecí kabel poškozen, zajistěte bezpečnost a nechte jej vyměnit u výrobce nebo v odborné opravně.
5. Výrobek uchovávejte mimo dosah ostrých předmětů. Nepoužívejte výrobek, pokud má poškozený látkový potah, jinak by mohlo dojít k poranění nohou. Dříve, než budete znovu výrobek používat, poraďte se s výrobcem nebo odbornou opravnou.
6. Jestliže přístroj nepoužíváte nebo pokud jej chcete čistit, odpojte jej od zdroje napájení.
7. Používaný výrobek nezakrývejte, jinak by se motor přehřál a mohlo by dojít k poškození přístroje.
8. Pokud během používání pocítujete nepříjemné vjemy, okamžitě přístroj přestaňte používat.
9. Vykazuje-li výrobek závadu, pak dřív, než jej budete znovu používat, obraťte se na výrobce nebo odbornou opravnu.
10. Používejte výhradně ty náhradní díly, které doporučuje výrobce.
11. Do otvorů přístroje nevkládejte a nepouštějte žádné předměty.

12. S výrobkem nemanipulujte mokřkýma rukama.
13. Nedotýkejte se ovládacích panelů vodou ani jinými tekutinami.
14. Než výrobek odpojíte od zdroje napájení, nejdříve jej vypněte.
15. Výrobek není určen ke stanovování vlastních diagnóz ani k vlastnímu léčení – to je vyhrazeno kvalifikovanému poskytovateli lékařských služeb.
16. Doporučujeme používat výrobek v prostředí s teplotou od 5 °C do 40 °C. Nepoužívejte výrobek ve vlhkém prostředí.
17. Nepoužívejte výrobek ve venkovním prostředí, ani jej nevystavujte přímému slunečnímu světlu.
18. Nepřemisťujte výrobek z prostředí s nízkou teplotou do prostředí s vysokou teplotou, protože by mohlo dojít ke kondenzaci vody a poškození výrobku. Poté, co výrobek přestanete používat, doporučujeme jej ponechat na místě s pokojovou teplotou po dobu 1 hodiny.

**Níže uvedené osoby by se měly poradit s lékařem dřív, než budou výrobek používat, aby se vyhnuly zdravotním problémům:**

- a) Lidé, kteří podstupují nějakou léčbu a lidé, kteří se necítí dobře.
- b) Lidé, kteří trpí vysokým krevním tlakem, chorobami srdce, mozkovou arteriosklerózou a mozkovou trombózou.
- c) Lidé, kteří mají zhoubný nádor.
- d) Ženy, které jsou těhotné a které mají menstruaci.
- e) Lidé, kteří trpí osteoporózou.
- f) Lidé, kteří mají implantovaný kardiostimulátor nebo jiný lékařský přístroj.
- g) Lidé, kteří trpí nějakou akutní nemocí.

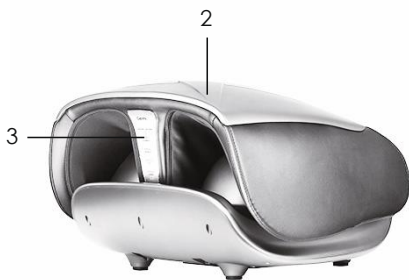
### Otázky a odpovědi

Pokud přístroj stále nefunguje, přestože jste při pokusu o odstranění závady postupovali dle níže uvedené tabulky, spojte se s prodejcem nebo dovozcem, případně se obraťte na odbornou opravnu.

Poznámka: Masážní přístroj doporučujeme používat 1-2krát denně, pokaždé nejvýše 15 minut.

Problém	Příčina	Náprava
Přístroj nepracuje.	Přístroj nebyl připojen ke zdroji napájení.	Zapojte přístroj do zásuvky nebo se přesvědčte, zda je zapojený správně.
	Nebylo stisknuto tlačítko napájení.	Stiskněte tlačítko napájení.
Výrobek přestal během používání pracovat.	Přístroj nebyl pevně připojen ke zdroji napájení.	Připojte přístroj k napájení pevně.
	Přístroj byl používán nepřetržitě po dobu 15 minut.	Stiskněte znovu tlačítko napájení.
	Výrobek byl používán delší dobu a mohlo dojít k zapnutí ochrany proti přehřátí.	Jakmile přístroj zchladne, zkuste jej znovu spustit.
	Tlak v masážních uzlech je příliš velký.	Uvolněte chodidla a snižte tak jejich zátěž.


### Schéma přístroje




1. napájení
2. část pro masáž lýtek vzduchem
3. ovládací panel I
4. odnímatelný kryt nohou
5. ovládací panel II

## Ovládací panel I




Stiskem  masážní přístroj zapnete. Po zapnutí se automaticky zahájí valivá masáž chodidel, stlačování boků lýtek, lýtek a chodidel a vibrační masáž chodidel.


Stiskem  ovládáte 3 stupně masáže stlačeným vzduchem.

Stiskem  ovládáte vibrační masáž chodidel ve 3 stupních intenzity, případně tuto funkci vypnete.



Stiskem  zapnete nebo vypnete funkci vyhřívání.

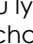
Stiskem  zapnete nebo vypnete režimy pro lýtko 1 / 2.

Stiskem  zapnete nebo vypnete režimy pro chodidla 1 / 2.

V režimu lýtek dlouhým stiskem  zastavíte valivou masáž chodidel, zatímco masáž stlačeným vzduchem boků lýtek, lýtek a chodidel pokračuje (její intenzitu lze nadále

ovládat). Dalším stiskem  se přepnete do normálního pracovního režimu.


V režimu chodidel dlouhým stiskem  zastavíte valivou masáž chodidel, zatímco masáž stlačeným vzduchem lýtek a chodidel pokračuje (její intenzitu lze nadále ovládat). Dalším stiskem  se přepnete do normálního pracovního režimu.


V režimu lýtek dlouhým stiskem  zastavíte masáž stlačeným vzduchem, zatímco valivá masáž chodidel pokračuje.

V režimu chodidel dlouhým stiskem  zastavíte masáž stlačeným vzduchem, zatímco valivá masáž chodidel pokračuje.

## Ovládací panel II






Stiskem  zapnete nebo vypnete část masáže chodidel. Po zapnutí se automaticky zahájí valivá masáž chodidel, masáž stlačeným vzduchem chodidel a vibrační masáž chodidel.

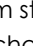
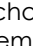
Stiskem  ovládáte 3 stupně masáže stlačeným vzduchem.

Stiskem  ovládáte vibrační masáž chodidel ve 3 stupních intenzity, případně tuto funkci vypnete.

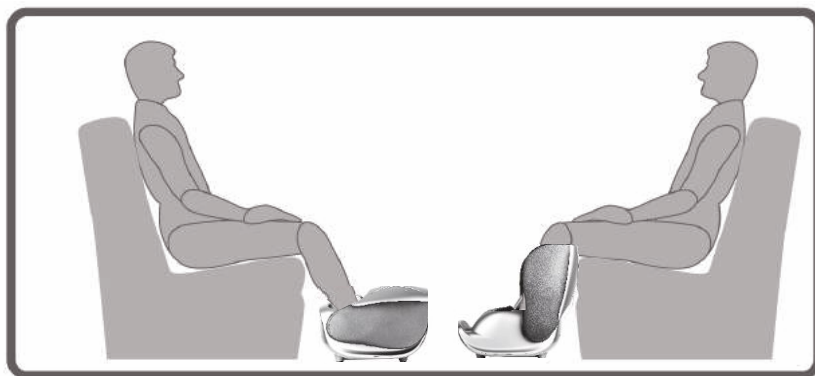
Stiskem  zapnete nebo vypnete funkci vyhřívání.

Stiskem  zapnete nebo vypnete režimy pro chodidla 1 / 2.

V režimu chodidel dlouhým stiskem  zastavíte valivou masáž chodidel, zatímco masáž chodidel stlačeným vzduchem pokračuje (její intenzitu lze nadále ovládat). Dalším stiskem  se přepnete do normálního pracovního režimu.

Dlouhým stiskem  zastavíte masáž chodidel stlačeným vzduchem, zatímco valivá masáž chodidel pokračuje. Dalším stiskem  znovu zapnete masáž chodidel stlačeným vzduchem.

## Návod k používání přístroje



1. Přístroj položte na plochou, čistou podlahu. Dbejte, aby byly kryty nohou dobře a bez poškození správně umístěny.
2. Připojte pomocí adaptéru výrobek k elektrické síti. Přístroj se přepne do pohotovostního režimu, kdy začne blikat kontrolka napájení. Posadte se do křesla a vložte nohy do krytů (nepoužívejte přístroj ve stoje).
3. Sbalený může přístroj provádět masáž chodidel. V rozbaleném stavu dokáže masírovat chodidla a lýtko. Podle potřeby můžete volit různé režimy masáže.
4. Ovládací panel I funguje jen v rozloženém stavu, zatímco ovládací panel II se používá jen tehdy, je-li přístroj složený.
5. Přístroj vypněte před tím, než jej sbalíte nebo rozbalíte.  
Poznámka: Při sbalování přístroj vypněte a ponechte alespoň 1 minutu nečinný, než se vzduch ze vzduchových kapes v lýtkové části uvolní.
6. Je-li stisknuto tlačítko napájení, přístroj se přepne do pohotovostního režimu. Totéž provede při automatickém ukončení provozu.

## Oblasti masáže

Tento výrobek je určený k masáži chodidel a lýtek.

## Záruka a služby zákazníkům

Potřebujete-li pomoci vyřešit problémy s používáním výrobku, využít další služby apod., spojte se s námi prostřednictvím webové stránky <https://www.neoxgroup.cz/kontakty/>

Záruční lhůta 2 roky od data nákupu.

NEOX GROUP s. r. o. , V Slavětíně 2632/23, Praha 9 - Horní Počernice 193 00, Česká republika

Vyrobeno v Číně



NEOX GROUP s.r.o. [www.neoxgroup.cz](http://www.neoxgroup.cz)