




Návod k použití



Shenzhen Pinlong E-Commerce Co., Ltd.
 Web: www.naipocare.com
 E-mail: support@naipocare.com
 Dodatek: Huanan City Electronic Trading
 Building P07 Room 120, Longgang District,
 Shenzhen, Čína

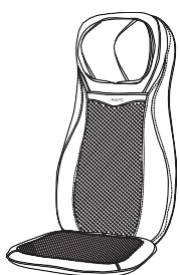

Obsah

Číslo

01-05

Úvod

Děkujeme za zakoupení masážního přístroje Naipo pro křík a záda. Tento návod si pečlivě přečtěte a uchovávejte jej na bezpečném místě pro pozdější použití. V případě, že byste potřebovali jakoukoliv pomoc, můžete se obrátit na naše oddělení podpory. Mějte pro tento účel připravené číslo modelu výrobku společně s číslem vaší objednávky přidělené internetovým obchodem Amazon.

Obsah balení:

- 1 x masážní přístroj pro křík a záda
- 1 x návod k použití
- 1 x adaptér
- 1 x adaptér do auta

Parametry výrobku

Model	MGM-C11C
Název	Masážní přístroj Naipo pro křík a záda
Napětí	12 V ss.
Pracovní proud	4 A
Časovač	15 minut

Důležitá bezpečnostní upozornění

- Tento výrobek je určen pro zdravé dospělé osoby. Dodržte následující bezpečnostní pokyny:
- Udržujte bezpečnou vzdálenost zdrojů vřikosti a ohně.
 - Použití výrobku proberte s lékařem a ověřte, že jste schopni zvládnout pravidelný průběh masáže bez nadměrné zátěže pro své tělo.
 - Nepoužívejte výrobek, jste-li opilý nebo unaveni.
 - Nepoužívejte výrobek osušími předměty.
 - Neměchte výrobek používat děti nebo těhotné ženy.
 - Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí.
 - Nepoužívejte výrobek současně se žádnými dalšími elektrickými zařízeními (např. s jiným elektrickým přístrojem pro stimulaci svalů).
 - Když se výrobek nepoužívá, vypněte jej a odpojte od napájení.

- Používejte pouze adaptér určený pro přístroj.
- Nepokládejte kabel ani zástrčku na horké předměty.
- Výrobek není určen pro zdravotnické nebo terapeutické účely.

Funkce

Masážní uzly jsou navrženy tak, aby imitovaly lidské ruce hnětící velké oblasti lidského těla. Dva páry hnětících uzlů budou klouzat nahoru a dolů po volném těle. Přístroj má tři masážní režimy: masáž celých zad, bederní částí zad a horní částí zad.




Sedadlo v automobilu

Kancelářské židle

Vlastnosti

- Čtyři funkce: hnětení kříku, hnětení zad, ohřev a vibrace
- Tři oblasti masáže zad: Horní, dolní nebo celá
- Tři úrovně vibrační intenzity: Nízká, střední a vysoká
- Vypne se po 15 minutách trvalého provozu.

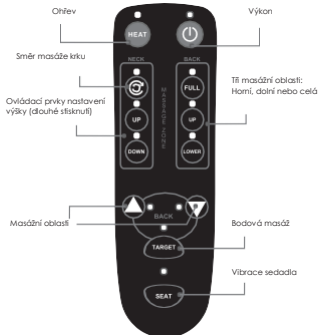

Tipy pro uživatele:

- Níže jsou uvedeny návrhy, které zlepší vaše zkušenosti s přístrojem. Postupujte podle nich a zároveň berzte v úvahu své individuální potřeby.
- Při používání výrobku se doporučuje určitý náklon (lůžko zvednout na vhodných individuálních polohách).
 - Nedoporučuje se jednorázová masáž dětí než 30 minut.
 - Než se vaše tělo přizpůsobí masážním produktům, je třeba provést několik masáží.

Pokyny k obsluze

- Připojte výrobek k napájení pomocí adaptéru.
- Přepněte zdrojový posuvník k zad.
- Upravte sedací polohu, dokud se nebudete cítit pohodlně.
- Stisknutím vypínače zapnete výrobek. Opakovaným stisknutím se přístroj vypne.
- Stisknutím vypínače ohřevu spusíte ohřev, dalším stisknutím ohřev vypnete.

Masáž kříku:

- Dlouhým stisknutím tlačítka „NAHORU“ resp. „DOLŮ“ posunete masážní uzly nahoru resp. dolů.
- Stisknutím můžete změnit směr masáže kříku.

Masáž zad:

- Stisknutím tlačítka „NAHORU“ spusíte masáž horní částí zad, tlačítkem „DOLŮ“ spusíte masáž bederní částí zad a tlačítkem „CELÉ“ spusíte masáž celých zad.
- Stisknutím tlačítka „CÍLENĚ“ spusíte masáž zvolených oblastí.
- Stisknutím se masážní uzly posunou nahoru. Po dosažení horního limitu se budou cyklicky pohybovat v oblasti mezi horním limitem a místem daným okamžikem stisknutí tlačítka . Stisknutím se masážní uzly posunou dolů. Po dosažení dolního limitu se budou cyklicky pohybovat v oblasti mezi dolním limitem a místem daným okamžikem stisknutí tlačítka .
- Jestliže nepravě stisknete tlačítka a poté , masážní uzly se budou pohybovat mezi 2 body, v nichž stisknete tato dvě tlačítka. Jestliže nepravě stisknete tlačítka a poté , masážní uzly se budou také pohybovat mezi 2 body, v nichž stisknete tato dvě tlačítka.

Masáž boků:

- Stisknutím tlačítka vibrací se spustí nízká úroveň vibrací. Dalším stisknutím tlačítka vibrací se spustí střední úroveň vibrací. Třetím stisknutím tlačítka vibrací se spustí vysoká intenzita vibrací a po čtvrtém stisknutí se vibrační funkce vypne.

Záruka a zákaznická podpora

S dotazy a žádostmi o asistenci či podporu, případně s reklamacemi v zaručené lhůtě nás můžete kontaktovat e-mailem nebo nábe uvedenou adresou.

Web: www.naipocare.com
 E-mail: support@naipocare.com
 Adresa: Huanan City Electronic Trading Building P07 Room 120, Longgang District, Shenzhen, Čína.

*Průběžně: Výrobky zakoupené přímo od společnosti Naipo mají vzhled v popředních obzích. Jestliže výrobek zakoupíte od jiného prodejce, doporučujeme se se zručným náročky obrátit na něj.