


Használati útmutató  
**LÁBMASSÍROZÓ GÖRDÜLŐ MASSZÁZZSAL  
ÉS LÉGKOMPRESSZIÓVAL**

Modell: MGF-F15

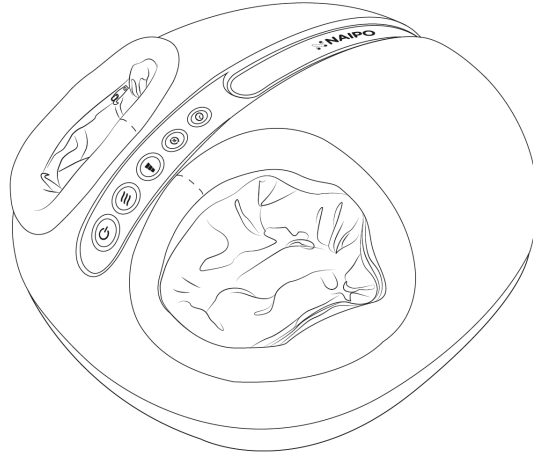

## BEVEZETÉS

Köszönjük, hogy megvásárolta a Naipo lábmasszírozót gördülő masszázsszal és légkompreszióval. Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót, és tartsa biztonságos helyen későbbi hivatkozás céljából. Ha segítségre van szüksége, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz a termékmodellről szám és Amazon rendelési szám.

## A CSOMAG TARTALMA

- 1 x lábmasszírozó
- 1 (pár) talpbetét
- 1 x adapter
- 1 x felhasználói kézikönyv

## TERMÉKLEÍRÁS

Modell	MGF-F15
Megnevezés	Naipo lábmasszírozó gördülő masszázsszal és légkompreszióval
Fogyasztás	36 W
Időzítő	10 perc / 15 perc / 20 perc


## FONTOS FIGYELMEZTETÉS

1. Ne használja a terméket párás környezetben az áramütés és egyéb lehetséges balesetek elkerülése érdekében.
2. Ne használja a terméket poros környezetben, mert meghibásodhat.
3. Ne tegye ki a terméket a közvetlen napfénynek.
4. Ne üljön rá a termékre.
5. Egészségügyi problémákkal küzdő személyek a termék használata előtt konzultáljanak orvosukkal.
6. Felnőttek felügyelete szükséges, ha a felhasználók gyermekek vagy csökkent mozgásképességű személyek.
7. Terhes nők ne használják a terméket.
8. Ne használja a terméket elalvás előtt.
9. Hagyja abba a termék használatát, ha erős fájdalmat vagy kellemetlen érzést érez.
10. Ne használja a terméket, ha az rendellenesen működik.
11. Javasoljuk, hogy egyes masszázssok időtartama ne haladja meg a 20 percet.

## KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK

Probléma	Megoldás
A készülék nem működik. Használat közben leáll.	Ellenőrizze, hogy az adapter csatlakoztatva van-e szorosan a tápegységhez.
	Ellenőrizze, hogy az adapter csatlakoztatva van-e a termékhez megfelelően.
	A termék automatikusan kikapcsol, miután elérte az előre beállított időt. Indítsa újra a terméket.
	Vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.
A fűtés hatása nem érezhető.	Várjon 5 percet a fűtési funkció aktiválása után.

## TERMÉK DIAGRAM

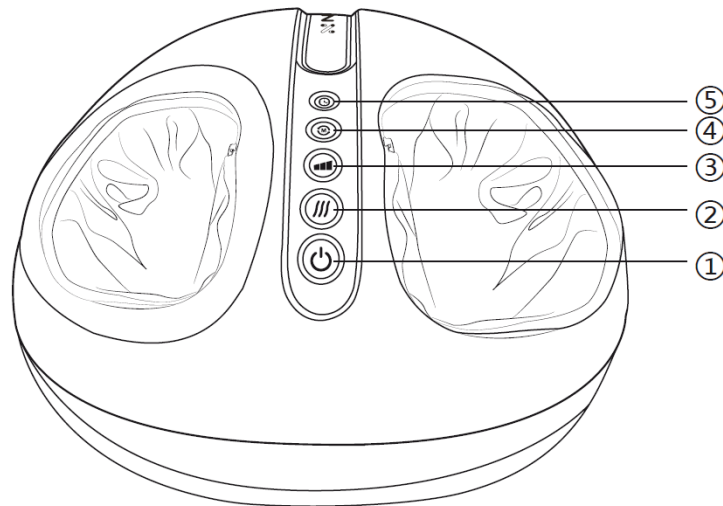

### 1. Bekapcsoló gomb

- 1) A tápegységhez való csatlakoztatás után a termék hangjelzéssel készenléti üzemmódba vált, és a logó világítani fog (kék színnel).
- 2) Nyomja meg a gombot a termék bekapcsolásához, az alapértelmezés szerint minden funkció aktiválódik.

### 2. Fűtés gomb

- A termék bekapcsolásakor a fűtési funkció alapértelmezés szerint aktiválódik (kijelző: kék).  
Nyomja meg a gombot a funkció kikapcsolásához.

### 3. Intenzitás gomb

- 1) Gyenge: A termék bekapcsolásakor az intenzitás szintje gyenge. (kijelző: kék).
- 2) Közepes (jelző: zöld)
- 3) Magas (kijelző: piros)

### 4. Mód gomb

- 1) üzemmód: gördülő masszáz + légkompresszió (masszázsido: gördülő masszáz > levegő masszáz / kijelző: kék)
- 2) üzemmód: gördülő masszáz + légkompresszió (masszázsido: légmasszázs > gördülő masszáz / kijelző: piros)
- 3) üzemmód: légmasszázs (a kijelző felváltva villog a kék és a piros között)

### 5. Időzítő gomb

- 1) 10 perc: A termék bekapcsolásakor a termék működési ideje alapértelmezés szerint 10 perc (kijelző: kék).
- 2) 15 perc: Ha megnyomja a gombot, a termék működési ideje 15 perc lesz. (kijelző: piros).
- 3) 20 perc: Nyomja meg újra a gombot, és a termék működési ideje 20 perc lesz (kijelző: lila).

## TERMÉK KARBANTARTÁS

1. A tisztítás előtt válassza le a terméket a tápegységről.
2. A tisztításhoz törölje át a termék felületét enyhén nedves ruhával vagy szivaccsal.
3. Ne tisztítsa maró hatású tisztítószerrel.
4. A lábüvelyek tisztításakor levehetőek.
5. Tárolja a terméket hűvös és száraz helyen.

## Garancia és ügyfélszolgálat

Kérdéseivel, segítségével, támogatásával vagy garanciális igényeivel forduljon hozzánk az alábbi e-mail címen vagy az alábbi címen.

Weboldal: [www.naipocare.com](http://www.naipocare.com)

E-mail: [support@naipocare.com](mailto:support@naipocare.com)

Kínában készült.

\*Megjegyzés: A közvetlenül a Naipo-tól vásárolt termékek értékesítés utáni szolgáltatásunk előnyeit élvezik. Ha a vásárlást más értékesítő csapatok végzik, javasoljuk, hogy garanciális kérdésekkel forduljon hozzájuk.



NEOX GROUP s.r.o. [www.neoxgroup.cz](http://www.neoxgroup.cz)

