

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

MASSÁZS KÉSZÜLÉK MÉLYMASSÁZSHOZ

típus: MGPC-00

Bevezetés

Köszönjük, hogy a Naipo mini mélymasszázs gépet vásárolta. Olvassa el figyelmesen a használati kézikönyvet, és őrizze meg későbbi alkalmaikra. Ha segítségre van szüksége a termékkel kapcsolatban, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálatunkal – lásd az elérhetőségeket.

Csomag tartalma

Megnevezés	Mennyiség
Masszázs készülék mély masszázshoz	1
Masszázsfej	4
USB kábel	1
Használati útmutató	1
Tápkábel	1

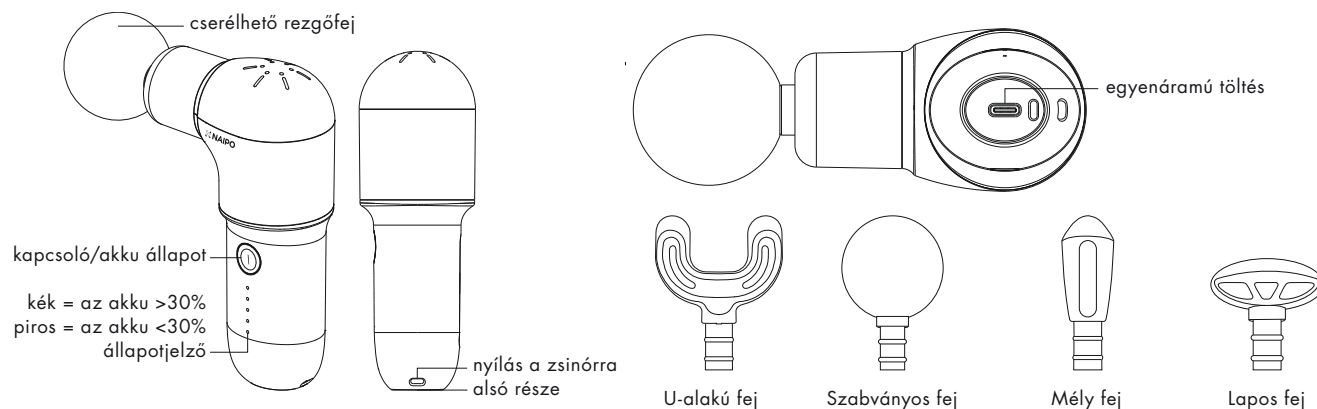
Fontos biztonsági utasítások

- Csak olyan területeket masszírozzon, amelyek nem duzzadtak vagy sérültek. Ne használja, ha fájdalmat vagy kényelmetlenséget érez.
- Ne használja a fejen, a csontokon és a test szilárd részein.
- Nem javasoljuk, hogy hosszan tartó masszázst végezzen egy területen. Ha fájdalmat vagy kényelmetlenséget érez használat közben, hagyja abba a készülék használatát.
- Csak tiszta és száraz területeket masszírozzon. Nyomja meg és finoman mozgassa a bőrön.
- Tartsa távol ujjait, haját és más testrészeit a készülék vibrációs tengelyétől, nehogy beakadjanak.
- Ne használja a szemeken, a fogakon, a mellkasi protéziseken, a nemi szerveken vagy a művégtagokon.
- Ne használja olyan helyen, ahol törés fordulhat elő.
- Ha folyamatos fájdalmat érez használat közben, hagyja abba a készülék használatát, és azonnal forduljon orvoshoz.
- A termék nem orvosi műszer, és nem használják gyógyászati célokra.
- Használat előtt ellenőrizze a készülék házáét és az USB-kábelt. Ha valamelyik alkatrész megsérül, forduljon a gyártóhoz vagy egy szakszervizhez.

Figyelem:

- Ne használja a készüléket töltés közben.
- Ne helyezzen semmilyen tárgyat a szellőzőnyílásokba.
- Ne merítse a terméket vízbe, és ne engedje, hogy a szellőzőnyílásokon víz jusson a készülékbe.
- Ne ejtse le, és ne használja helytelenül.
- A készülék használata előtt győződjön meg arról, hogy az eszköz, az akkumulátor és az USB-kábel működik.
- Semmilyen módon ne módosítsa vagy módosítsa a terméket.
- Ne hagyja felügyelet nélkül a terméket töltés vagy bekapcsolt állapotban.
- A készüléket CSAK az eredeti USB-kábellel töltsé.
- Ne helyezze a készüléket kandallóba.
- A túlmelegedés elkerülése érdekében ne használja a készüléket folyamatosan 1 óránál tovább. Hagyja kikapcsolva 30 percig, mielőtt újból hozzáférné.

Termékleírás





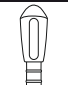

Használati útmutató

Töltés

- A tápellátás jelzőfénye zölden világít, amikor a készülék töltődik, és a lámpa kialszik, ha az akkumulátor teljesen feltöltődött.
- A masszírozófej felszerelése: Kikapcsolt készülék mellett nyomja be határozottan a masszírozófejet a készülék testébe. (Megjegyzés: Mikor igazítja a kapcsot a nyílásba az U alakú fej felszerelésével. Az összeszerelés azonnal befejeződik, amint a klip a nyílásba került. Ha nem rögzül a helyén, fennáll a csúszás veszélye.)
- A masszázsszfej szétszerelése: Kikapcsolt készülék mellett húzza ki a fejet (Megjegyzés: Húzza ki egyenesen a fejet, ne fordítsa el vele.)
- Indítás: Tartsa lenyomva a „⓪” gombot legalább 2 másodpercig, és indítsa el az 1. szintű eszközt.
- Szintek váltása: Nyomja meg röviden a „⓪” gombot, hogy a szintet 0-ról 5-re váltsa.
- Masszázs leállítása: Ha a készüléket 1-5 fokozatra kapcsolja, akkor a „⓪” gomb 2 másodpercig tartó lenyomásával visszaállítja a készüléket 0 szintre.
- Leállítás: Ha az eszköz 0-s szinten van, nyomja meg a „⓪” gombot 2 másodpercig az eszköz kikapcsolásához.
- Válassza ki az Önnek megfelelő masszázsszintet.

Karbantartás, tisztítás és tárolás

- Tisztítsa meg a készüléket egy nedves törülközővel, és törölje le a felesleges vizet egy száraz ruhával.
- Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket: tegye vissza a készüléket az eredeti csomagolásába, és tárolja száraz helyen. Az akkumulátor károsodásának elkerülése érdekében havonta egyszer töltsse fel a készüléket.
- Ne kísérelje meg szétszerelni a készüléket. Útmutató a tartozékokhoz
- Az új teljesítmény érdekében legalább háromszor teljesen töltsse fel és merítse ki az új akkumulátort.

U alakú fej	
	Kijelölt területek: a hátizmok és a gerinc területe. Funkció: Ellazítja az izomcsoportokat és helyreállítja az izmok rugalmasságát.
Szabványos fej	
	Kijelölt területek: Egész test, merev izmok (izomlazítás). Funkciója: Elősegíti a lágyszövetek megújulását, csökkenti a terhelés utáni fájdalmat, enyhe közvetett hatása van.
Lekerekített fej	
	Kijelölt területek: Bizonyos izomcsoportok és mély izomszövetek / sérült ízületek (célzott masszázs). Funkció: Ellazítja az izmok és a csomópontok merevségét.
Lapos fej	
	Kijelölt területek: Azok az izmok, amelyek helyreállításához erőteljes masszázssra van szükség. Funkció: Mélyizommasszázs és relaxáció.
Megjegyzés: A fenti utasítások csak tájékoztató jellegűek. Használja a kiegészítőket az állapotának és orvosa ajánlásainak megfelelően.	

Problémamegoldás

Probléma	Ok	Megoldás
Nem működik.	Alacsony akkumulátor.	Töltsse fel újra az akkumulátort és a készüléket kapcsolja be.
A készülék leállt, amikor ellenállásba ütközött.	Működésbe lépett a túláramvédelem.	Kapcsolja ki, majd be a készüléket.

Műszaki adatok

Típus: MGPC-002

Megnevezés: masszázskészülék mélymasszázshoz

Tápellátás: 5 V DC, 2 A

Akkumulátor élettartama (1 töltésenként): ≥2 óra

Töltési idő: ≈3 óra

Automatikus leállítás: ≈10 perc

Akkumulátor kapacitása: 2500 mAh

Masszázs területei: teljes test

Garancia és ügyfélszolgálat

Ha segítségre van szüksége a termék használatával kapcsolatos problémák megoldásában, egyéb szolgáltatások igénybevételeiben stb., vegye fel velünk a kapcsolatot a <https://www.neoxgroup.cz/kontakty/> weboldalon keresztül.

Jótállási idő a vásárlástól számított 2 év.

NEOX GROUP s. R. O., V Slavětíně 2632/23,
Praha 9 - Horní Počernice 193 00, Csehország
Készült: Kínában.



NEOX GROUP s.r.o. www.neoxgroup.cz

