


návod na použitie

Mini masážny prístroj

typ: MGPC-101MM

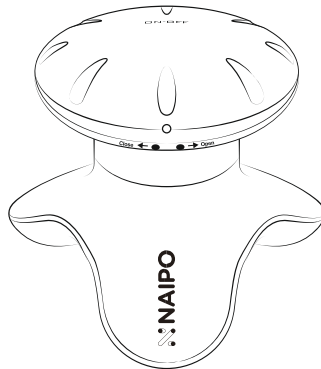

Úvod

Ďakujeme, že ste si kúpili mini masážny prístroj firmy Naipo. Prečítajte si pozore tento návod na použitie a uschovajte si ho, aby ste sa k nemu v prípade potreby mohli vrátiť.

Balenie obsahuje

- 1 x vibračný masážny prístroj
- 3 x batérie typu AAA (mikrotužkové)
- 1 x návod na použitie


Technické údaje

Typ	mini masážny prístroj Naipo
hmotnosť	≈0,26 kg
rozmery	11,2 x 10,3 x 9,3 cm
materiál	ABS, živica
napájanie	rovno smerné 4,5 V, 3 x batérie AAA
spotreba energie	1,3 VA
intenzita masáže	nízka
vodeodolnosť	stupeň ochrany IP44

Návod na používanie prístroja

Vkladanie batérií

1. Otvorte kryt prístroja a vložte 3 mikrotužkové (AAA) batérie s polaritou podľa nasledujúcej schémy:

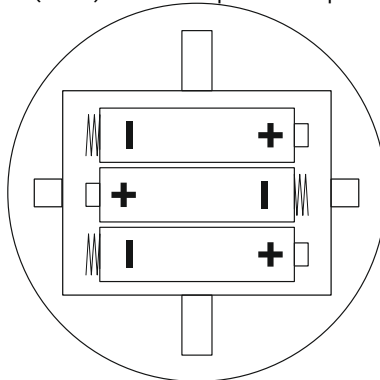

2. Potvrďte správnu orientáciu kladného a záporného pólu batérií a poriadne zaistite kryt priestoru na batérie.

Ovládanie

1. Umiestnite 3 masážne ramená na časť tela, ktorú chcete masírovať a pritlačte dole hornú časť masážneho prístroja.
2. Masážny prístroj bude vibrovať tak dlho, pokiaľ budete dostatočne tlačiť na hornú časť zariadenia.

Riešenie problémov

Problém	Možná příčina	Riešenie
Zariadenie nefunguje.	Batérie sú slabé alebo sú vložené nesprávnou polaritou.	Vymeňte batérie alebo overte, či sú správne vložené.
Vibrácie sú neobvykle slabé.	Slabé batérie.	Vymeňte batérie.

Údržba

Povrch masážneho prístroja navlhčite mäkkou handričkou s alkoholom a otrite.

Po použití uschováajte masážny prístroj na bezpečnom mieste.

Na hornú časť masážneho prístroja nič naskladajte.

Nerozoberajte.

Preprava a skladovanie

Teplota prostredia: 15 °C – 35 °C

Maximálna relatívna vlhkosť: 75 %

Vetraná miestnosť bez agresívnych plynov.

Atmosférický tlak: 860 – 1060 mbar

Masážny prístroj je ľahko odolný proti nárazom, vhodný na prepravu lietadlom, železničnou dopravou, po cestách či lodiach.

Neponárajte do tekutín a nevystavujte nárazom.

Záruka a služby zákazníkom

Ak potrebujete pomoc vyriešiť problémy s používaním výrobku, využijte ďalšie služby apod., spojte sa s nami prostredníctvom webovej stránky <https://www.neoxgroup.cz/kontakty/>

Záručná lehota sú 2 roky od dátumu nákupu.

NEOX GROUP s. r. o., V Slavětíně 2632/23, Praha 9 - Horní Počernice 193 00, Česká republika

Vyrobené v Čine

IP44
Made in China



NEOX GROUP s.r.o. www.neoxgroup.cz