

Használati útmutató

2 AZ 1-BEN NYOMÓS ÉS GÖRDÜLŐ MASSZÁZZSAL ELLÁTOTT LÁB- ÉS VÁDLIMASSZÁZS KÉSZÜLÉK

típus: MGF-3600



Bevezetés

Köszönjük, hogy 2 az 1-ben nyomós és gördülő masszázssal ellátott láb- és vádlimasszázs készüléket vásárolt. Olvassa el figyelmesen ezt a kezelési útmutatót, és őrizze meg későbbi használatra. Ha segítségre van szüksége, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz. Kérdéskor meg kell adni a készülék típusmegnevezését és a rendelési számot.

A csomag tartalmaz

- 1 x láb- és vádlimasszázs készülék
- 1 x adapter (kérjük, csak a megadott adaptert használja)
- 1 x használati utasítás

Műszaki adatok

Típus	MGF-3600
Megjelölés	Naipo láb- és vádlimasszázs-készülék 2 az 1-ben, nyomással és gördülő masszázssal
Névleges feszültség	24 V DC
Áramfelvétel	55 W
Időzítő	15 perc

Fontos biztonsági utasítások

Használat előtt figyelmesen olvassa el a teljes útmutatót a készülék helyes és biztonságos használata érdekében.

1. Ha a terméket fogyatékkal élő személyek használják, akik bármilyen típusú érzékszervi vagy mentális zavarban szenvednek, vagy olyan személyek, akik nem rendelkeznek tapasztalattal és ismeretekkel a termék használatában (beleértve a gyermekeket is), szükséges felügyelet.
2. Tartsa a készüléket gyermekektől távol.
3. A gép felülete felforrósodhat, mert a termék beépített fűtéssel rendelkezik. A hőre nem érzékenyeknek tudniuk kell ezt.
4. Ha a tápkábel megsérült, ügyeljen a biztonságra, és cseréltesse ki a gyártóval vagy egy szervizközponttal.
5. Tartsa távol a terméket éles tárgyaktól. Ne használja a terméket, ha sérült a szövethuzata, különben megsérülhet a lába. A termék újbóli használata előtt forduljon a gyártóhoz vagy egy szakszervizhez.
6. Húzza ki a készüléket a konnektorból, ha nem használja, vagy ha tisztítja.
7. Ne takarja le a használt terméket, különben a motor túlmelegszik és a készülék megsérülhet.
8. Ha bármilyen kellemetlenséget érez használat közben, azonnal hagyja abba a készülék használatát.
9. Ha a termék hibás, az újbóli használat előtt lépjen kapcsolatba a gyártóval vagy szakképzett szervizképviselővel.
10. Csak a gyártó által javasolt pótalkatrészeket használja.
11. Ne helyezzen be vagy ejtsen semmilyen tárgyat a készülék nyílásaiba.

12. Ne kezelje a terméket nedves kézzel.
13. Ne érjen a vezérlőpanelekhez vízzel vagy más folyadékkal.
14. Mielőtt kihúzná a konnektorból, kapcsolja ki a terméket.
15. A termék nem öndiagnózisra vagy öngyógyításra szolgál, ezt szakképzett egészségügyi szolgáltatónak tartják fenn.
16. Javasoljuk, hogy a terméket 5° C és 40° C közötti hőmérsékletű környezetben használja. Ne használja a terméket nedves környezetben.
17. Ne használja a terméket a szabadban, és ne tegye ki közvetlen napfénynek.
18. Ne vigye a terméket alacsony hőmérsékletű környezetből magas hőmérsékletű környezetbe, mert ez vízlecsapódást és a termék károsodását okozhatja. A használat végeztével azt javasoljuk, hagyja a terméket szobahőmérsékleten kb.1 órán át.

Az egészségügyi problémák elkerülése érdekében a következő személyeknek konzultálniuk kell orvosukkal a termék használata előtt:

- a) Olyan emberek, akik valamilyen kezelés alatt állnak, és akik rosszul érzik magukat.
- b) Magas vérnyomásban, szívbetegségben, agyi érlemeszesedésben és agyi trombózisban szenvedők.
- c) Rákos betegek.
- d) Terhes és menstruáló nők.
- e) Csontritkulásban szenvedők.
- f) Olyan személyek, akik beültetett szívritmus-szabályozóval vagy más orvosi eszközzel rendelkeznek.
- g) Akut betegségben szenvedők.

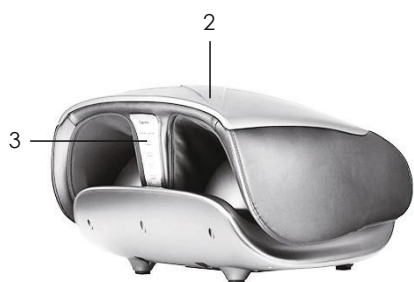
Kérdések és válaszok

Ha az egység továbbra sem működik, annak ellenére, hogy követte az alábbi táblázatot, forduljon a kereskedőhöz/importőrhez, vagy ill. szakszervizhez.

Megjegyzés: Javasoljuk, hogy a masszázskészüléket naponta 1-2 alkalommal használja, minden alkalommal maximum 15 percig.

PROBLÉMA	OK	MEGOLDÁS
A készülék nem működik.	A készülék nem volt csatlakoztatva az áramforráshoz.	Csatlakoztassa a készüléket, vagy ellenőrizze, hogy megfelelően van-e csatlakoztatva.
	A bekapcsológombot nem nyomták meg.	Nyomja meg a bekapcsoló gombot.
A termék használat közben leállt.	A készülék nem volt szilárdan csatlakoztatva a tápegységhez.	Csatlakoztassa szilárdan a készüléket a tápegységhez.
	A készüléket 15 percig folyamatosan használták.	Nyomja meg újra a bekapcsológombot.
	A terméket hosszú ideig használták, és előfordulhat, hogy a túlmelegedés elleni védelem aktiválódott.	Amikor az eszköz lehűl, próbálja meg újraindítani.
	A masszázs csomópontjaiban a nyomás túl magas.	Lazítsa meg a lábát, hogy csökkentse a terhelést.


Készülék diagram




1. tápegység
2. vádli légmassázs része
3. vezérlőpult I
4. levehető lábvédő
5. vezérlőpult II

Vezérlőpult I





Nyomja meg a  masszírozó bekapcsolásához. Bekapcsolás után automatikusan elindul a lábak gördítése, a vádli oldalának, vádlinak és lábfejének kompressziója és a vibrációs talpmasszázs.



Nyomja meg a  sűrített levegős masszázs 3 fokozatának szabályozásához.


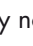
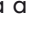
Nyomja meg a  vibráló talpmasszázs 3 intenzitási fokozatban történő szabályozásához, vagy kapcsolja ki ezt a funkciót.

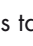
Nyomja meg a  fűtési funkció be- vagy kikapcsolásához.

Nyomja meg a  vádli 1/2 üzemmódok be- vagy kikapcsolásához.

Nyomja meg a  lábmódok 1/2 be- vagy kikapcsolásához.


Vádli üzemmódban a hosszan tartó  nyomás leállítja a gördülő talpmasszázs, míg vádli és lábfej sűrített levegős masszázsa folytatódik (intenzitása továbbra is szabályozható). Nyomja meg újra , hogy normál üzemmódba váltson.

Láb üzemmódban a hosszan tartó  megnyomás leállítja a gördülő talpmasszázs, miközben a vádli és a lábfej sűrített levegős masszázsa folytatódik (intenzitása továbbra is szabályozható). Nyomja meg újra , hogy normál üzemmódba váltson. Vádli üzemmódban a hosszan tartó  megnyomás leállítja a sűrített levegős masszázst, miközben talpmasszázs folytatódik.


Láb üzemmódban nyomja meg  és tartsa lenyomva a sűrített levegős masszázs leállításához, miközben a gördülő talpmasszázs folytatódik.

Vezérlőpult II





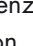
Nyomja meg a  a talpmasszázs egy részének be- vagy kikapcsolásához. Bekapcsolás után automatikusan elindul a gördülő talpmasszázs, a sűrített levegős talpmasszázs és a vibrációs talpmasszázs.

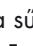

Nyomja meg a  a sűrített levegős masszázs 3 fokozatának szabályozásához.

Nyomja meg a  a vibráló talpmasszázs 3 intenzitási fokozatban történő szabályozásához, vagy kapcsolja ki ezt a funkciót.

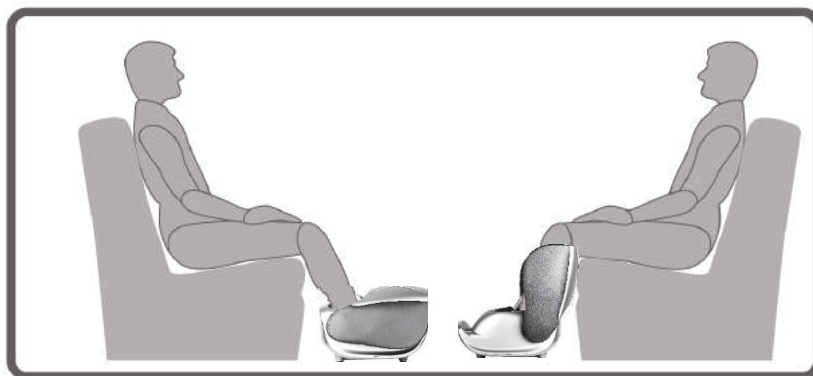
Nyomja meg a  a fűtési funkció be- vagy kikapcsolásához.

Nyomja meg a  a lábmódok 1/2 be- vagy kikapcsolásához.

Láb üzemmódban a hosszan tartó  megnyomás leállítja a talpmasszázs, míg a lábmasszázs sűrített levegővel folytatódik (intenzitása továbbra is szabályozható). Nyomja meg újra , hogy normál üzemmódba váltson.

A hosszan tartó  nyomás leállítja a sűrített levegős lábmasszázs, míg a gördülő talpmasszázs folytatódik. Nyomja meg újra  a sűrített levegős lábmasszázs ismételt bekapcsolásához.

Útmutató a készülék használatához



1. Helyezze a készüléket sima, tiszta padlóra. Győződjön meg arról, hogy a lábvédők megfelelően és sérülésmentesen helyezkednek el.
 2. Csatlakoztassa a hálózathoz az adapter segítségével. A készülék készenléti üzemmódba lép, amikor a tápellátás jelzőfénye villogni kezd. Üljön le egy székre, és tegye a lábát a takaróba (állva ne használja a készüléket).
 3. Csomagoltan a készülék talpmasszázs tud végezni. Kicsomagolva masszírozhatja a lábfejet és a vádli. Igény szerint különböző masszázsmódokat választhat.
 4. Az I-es vezérlőpult csak kihajtván működik, míg a II-es vezérlőpult csak összecukott állapotban.
 5. Csomagolás vagy kicsomagolás előtt kapcsolja ki a készüléket.
- Megjegyzés: Csomagolásakor kapcsolja ki a készüléket, és hagyja üresjáratban legalább 1 percig, amíg teljesen ki nem szabadul a levegő a vádli légzeseiből.
6. A bekapcsológomb megnyomásakor a készülék készenléti módba lép. Ugyanezt teszi, amikor automatikusan kilép művelet.

Masszázs területek

Ez a termék láb- és vádlimasszázsra készült.

Garancia és ügyfélszolgálat

Ha segítségre van szüksége a termék használatával kapcsolatos problémák megoldásához, egyéb szolgáltatások igénybevételéhez stb., vegye fel velünk a kapcsolatot a <https://www.neoxgroup.cz/kontakty/> weboldalon.

Jótállási idő a vásárlástól számított 2 év.

NEOX GROUP s. R. O.,

V Slavětíně 2632/23,

Praha 9 - Horní Počernice 193 00, Csehország

Kínában készült



NEOX GROUP s.r.o. www.neoxgroup.cz